



F6 フルフェイスマスク

小型デザインで、快適な装着感を実現したフルフェイスマスク



機能



シリコンクッションが圧迫感を軽減

接触面積を抑えることで、装着の圧迫感を軽減し、より快適な眠りを実現します。




共通メインフレーム

複数サイズのクッションに対応したメインフレームにより、シンプルで使いやすく、スムーズなフィッティングを実現します。




リング状排気ポート

リング状排気ポートにより、排気音を約17 dB(A)まで低減し、就寝時にも周囲へ配慮した静音性を提供します。

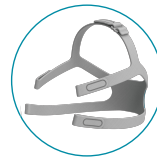

安定したヘッドギア

細かな調整で頭部にしっかりフィットし、快適で安定した装着感を提供します。

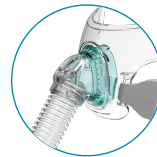


ロータリーエルボ

回路が360°回転します。

仕様

圧力と流量

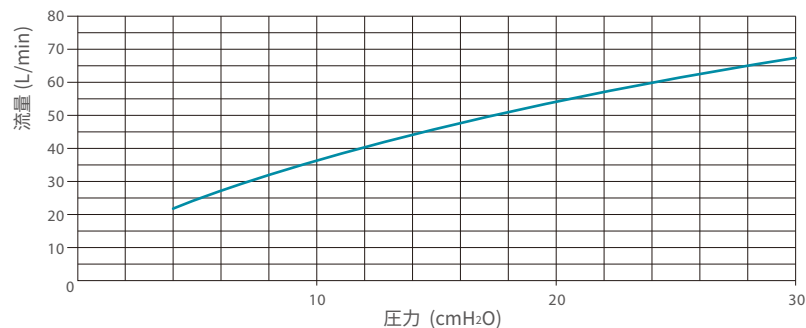

圧力 (cmH ₂ O)	4	10	12	17	24	30
流量 (L/min)	22	37	41	49	59	67

圧力範囲

4 ~ 30 cmH₂O

圧力低下

50 L/min時: 0.15 cmH₂O
100 L/min時: 0.5 cmH₂O

マスクデッドスペース

マスクデッドスペースとは、スイベルから上のマスク部分になります。クッションのサイズにより若干変化しますが、おおよそ225ml以下になります。

窒息防止弁開放時の呼気と吸気抵抗

50 L/min時: 呼気抵抗 2.0 cmH₂O
50 L/min時: 吸気抵抗 1.8 cmH₂O

窒息防止弁開放圧力

< 4 cmH₂O

窒息防止弁閉鎖圧力

< 4 cmH₂O

騒音

本マスクの騒音は、GB/T 14574-2000およびGB/T 3767-2016規格 (ISO4871) に適合しています。
A特性音響パワーレベル: 25 dBA (測定誤差 ±3 dBA)
装置から1 mの位置におけるA特性音圧レベル: 17 dBA (測定誤差 ±3 dBA)。

販売名

F6 フルフェイスマスク

届出番号

13B1X10409000006

一般的名称

人工呼吸器用マスク

クラス分類

一般医療機器

サイズ

MW、L、M、S

製造販売業者 株式会社 ライフテクノロジー

本社住所: 〒143-0013

東京都大田区大森南1-19-4

TEL: 03-5422-9767

URL: <http://life-tech.co.jp>

■ お問い合わせは...