



L1 呼吸チューブ




チューブは、効果的で快適なCPAP療法において重要な役割を果たします。

型式: D19

従来チューブより30%軽量のL1スリム呼吸チューブ (D15) は、快適性と利便性を大幅に向上させます。


型式: D15

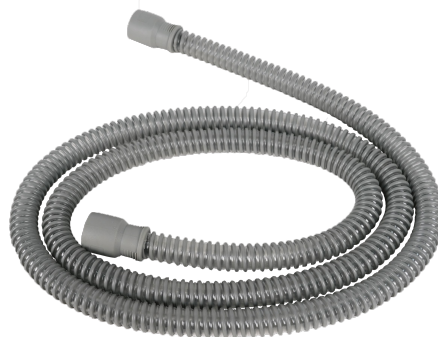

BMC Medical Co., Ltd.

Room 110 Tower AFengyu Building, No.115 Fucheng Road, Haidian, 100036 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86-22-8293 9881 Fax: +86-22-8293 9881 etx. 810 en.bmc-medical.com SC-20-02-03-10-001-Ver1.0



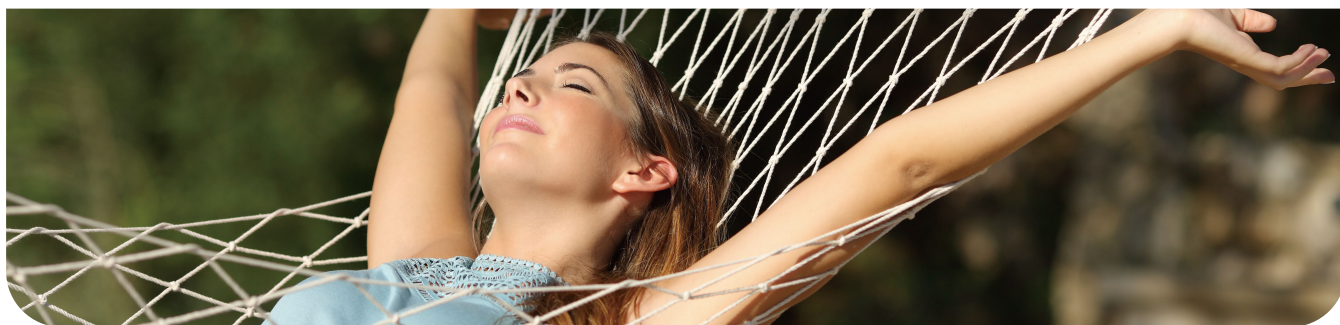

主な特長

軽量

軽量性により、治療中にマスクが引っ張られる負担を軽減できます。軽いほど、動きの自由度が高まります。さらに、スリム設計により、CPAPキャリーバッグへの収納が容易です。

耐久性

高品質材料により、チューブの経時劣化を抑え、耐腐食性を高めます。

キンク耐性

科学的に設計されたスパイラルピッチにより、柔軟性を高め、キンク（折れ曲がり）に強い構造です。

互換性

22mmカフ（接続口）を採用し、多くのCPAP装置に対応します。

仕様

材質

カフ：TPE チューブ本体：POE スパイラル：PP

チューブ	長さ	重量	内径	適合規格	定格流量における流量抵抗
D19	1.8m	100.2g	19mm	60 hPa: <5ml/hPa	30 l/min: <0.06hPa/l/min
D15	1.8m	77.5g	15mm	60 hPa: <5ml/hPa	30 l/min: <0.06hPa/l/min

動作条件

周囲温度：5℃～35℃（41°F～95°F）

相対湿度：0%～93%

保管・輸送条件

保管温度：-25℃～55℃（-13°F～131°F）

相対湿度：0%～93%

チューブは元の包装のまま輸送・保管し、ほこりおよび直射日光への曝露から保護してください。

耐用期間

通常の保守および使用条件下におけるチューブの想定耐用期間は6か月です。

販売名	医療機器認証番号	一般名称	クラス分類
L1 呼吸回路	307ALBZX00025000	再使用可能な人工呼吸器呼吸回路	管理医療機器

製造販売業者 株式会社 ライフテクノロジー
本社 住所：〒143-0013 東京都大田区大森南1-19-4
TEL: 03-5422-9767
URL: <http://life-tech.co.jp>

■ お問い合わせは...